

2019年 9月1日改訂(第5版)**

届出番号：13B3X0035500001

2017年 2月1日改訂(第4版)*

器55医療用洗浄器

一般医療機器 手動式生体用洗浄器 34630000(JMDNコード)

ハナクリーンEX

【禁忌・禁止】*


- ・洗浄後に鼻を軽くかむ必要があるため鼻が充分にかめない方は使用しないでください。*
- ・風邪をひいている時は中耳炎を起こす可能性があるため使用しないでください。*
- ・鼻の炎症(鼻づまり等)のひどい時、耳に疾患のある時は医師に相談の上使用してください。
- ・耳に痛み(圧力)を感じる時は水圧を弱めにしてください。また改善しない時は使用を中止してください。*
- ・使用中や使用後に異常を感じた時は使用を中止してください。

◎お子様が使用される際

- ・保護者の指導の下で使用してください。
- ・鼻を充分にかめないお子様は使用しないでください。
- ・風邪をひいている時、鼻づまりのひどい時は使用しないでください。
- ・鼻や耳に疾患のある時は医師に相談の上使用してください。

【形状、構造及び原理等】**

1. 構成**

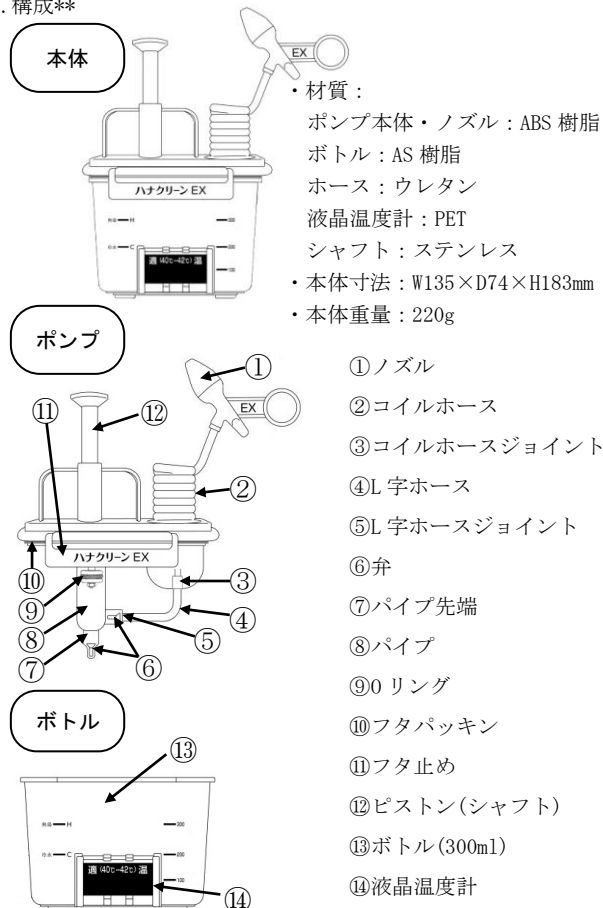

2. 原理*

ボトルに300mlの洗浄液を入れて本体のピストンを押す事によりノズル先端の穴から水流が出る。
ピストンを押す力により水圧の調節が可能。

3. 付属品

《サーレMP(30包入)》



- ・洗浄液の濃度を調節する為に1回分(300ml)に1包を入れて使用する。
- ・成分：塩化ナトリウム・メントール・ペパーミント

《収納ケース》



- ・本体を収納するケース

【使用目的又は効果】

鼻腔内の洗浄

【使用方法等】**

《準備》

初めてお使いになる時は一度水を通し、全体をよく水洗いしてから使用してください。

- ①フタ止めを外し、ポンプをボトルから取り外します。
- ②ボトルに300mlの温水(40～42℃)を用意します。
 - A. 給湯器で温度設定ができる方
ボトルのHラインまでお湯を入れます。
 - B. 給湯器で温度設定ができない方
ボトルの冷水ライン「C」まで水を入れ、熱湯ライン「H」まで熱湯を注ぎ足します。
- ③温度計で適温(40～42℃)であることを確認します。
※熱く感じる場合は38～40℃で使用してください。*
- ④付属のサーレMPを1包(3g)入れ、よく溶かします。
- ⑤ポンプをボトルにセットし、フタ止めでしっかり固定します。
- ⑥ノズルをお好みにセットします。
 - A. シャワー・・・やさしく洗いたい時
 - B. ストレート・・・しっかり洗いたい時
 ※購入時はシャワーにセットされています。ストレートに切り替える際はノズル先端を左に回して引き上げ、右に回して固定してください。

《使用方法》**

洗面所や浴室などで行うか、受け皿を用意します。
洗浄液が出るまでピストンを数回押してください。

- ⑦ノズルを鼻腔に垂直になるように軽く鼻にあて、前かがみになります。
- ⑧「エー」と発声しながらピストンを押して鼻を洗浄します。
3～5プッシュずつ両鼻を交互に洗浄液がなくなるまで続けます。*

※洗浄に慣れるまでは水压を強くかけないでください。

※洗浄液は300mlすべて使い切るのが効果的です。

⑨洗浄後は鼻を片方ずつやさしくかんで、鼻に残った洗浄液を出して終了です。

※洗浄後しばらくして鼻の奥に残った洗浄液が出てくることがありますが問題はありません。前かがみになり頭を左右に傾けると出やすくなります。*

⑩洗浄後は本体のお手入れをしてください。

【使用上の注意】**

①使用前の注意

- ・熱湯を扱う際はやけどに気を付けてください。
- ・洗浄液の温度は40～42℃の範囲で使用してください(44℃以上の場合はやけどをする可能性があります)。
- ・洗浄する際は必ず付属のサーレMPを使用してください(洗浄液の濃度を調節し、鼻粘膜への刺激を減らす為)。
- ・原則として本人以外は使用しないでください。本人以外が使用する場合は交換用ノズル(別売)を使用してください(感染症を予防する為)。
- ・洗浄は洗面所などで前かがみになり衣服を濡らさないように注意して行ってください。

②使用時の注意

- ・耳への圧力を軽減する為ノズルで鼻を完全に密閉しないでください。
- ・洗浄液が気管に入るのを防ぎ耳への圧力を軽減させる為、必ず「エー」と発声しながらピストンを押してください。
- ・洗浄液は1度で使い切り、残った場合は捨ててください。

③本体の扱いについての注意**

- ・耐熱素材ではないので、熱湯につけたり煮沸はしないでください。電子レンジや食洗器も使用できません。
- ・温度計は38～44℃以外の時は反応しません。また、温度計は熱湯につけると破損するので注意してください。
- ・水が入った状態で本体を傾けると水が漏れるので注意してください。

【保管方法及び有効期間等】*

④長期間使用しない時*

- ・本体はよく乾燥させてから、直射日光や高温多湿を避けて保管してください。
- ※水分が残っているとカビや錆などの原因になります。
- ・使用を再開する時は一度水を通し、全体をよく水洗いしてから使用してください。
- ・標準的な使用期間の目安
ハナクリーンEX本体：5年〔自己認証による〕
サーレMP：5年〔自己認証による〕

【保守・点検に係る事項】**

⑤使用後のお手入れ(毎回)

- ①ボトルに1/3位の水を入れ、ピストンを押して中に残った洗浄液を洗い出し、内部の水分が取り除けるまで空押しします。
 - ②ノズルをよく洗い、全体も軽く洗ってから自然乾燥してください。
- ※表面の汚れが気になる時は中性洗剤で洗い、よく水ですいでください。

◎消毒方法**

本体内部は水アカやカビの予防として市販の逆性石鹼で定期的(月に1-2回)につけ置き消毒してください。

A. ノズル・コイルホース・L字ホース・フタパッキン
本体から外してつけ置き消毒します。

B. パイプ
パイプ先端とL字ホースジョイントは外さずにパイプごとつけ置き消毒します。

※本体全体のつけ置き消毒・熱湯(煮沸)消毒はしないでください。*


◎部品交換*

ノズル・コイルホース・L字ホースは衛生上、1年に1回は交換してください。

◎パイプ内部のお手入れ(月に1回位)

ポンプ動作が安定し、衛生的にお使い頂けます。

- ①L字ホースを下に引いて外します。
※L字ホースをパイプ側から外すと弁の紛失に繋がります。
- ②パイプを左に止まるまで回し(②-1)、下に引き抜きます(②-2)。
※パイプを強く回しすぎると破損するおそれがあります。
- ③パイプ内部とOリングを柔らかい布などで拭きます。
- ④白色ワセリン(別売)をOリングに塗ります。
- ⑤パイプを元の位置に差し込み右に止まるまで回し、L字ホースをしっかりと取り付けます。

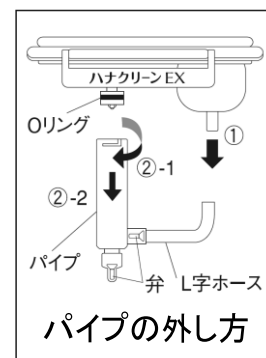

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者

名称：株式会社 東京鼻科学研究所
住所：東京都目黒区鷹番2-10-7
電話番号：03-3792-2460

製造業者

名称：株式会社 東京鼻科学研究所
住所：東京都目黒区鷹番2-10-7
電話番号：03-3792-2460

発売業者

名称：株式会社 ティー・ビー・ケー
住所：東京都目黒区鷹番2-10-7
電話番号：03-3792-5080

【部品・修理・その他のお問い合わせ】

株式会社 ティー・ビー・ケー
〒152-0004 東京都目黒区鷹番 2-10-7
TEL 03-3792-5080 FAX 03-3792-1323
受付時間 9:00～17:30(土 日 祝日を除く)

使用方法・お手入れ方法の詳細については
必ず取扱説明書をお読みください。